

Stampare i dati memorizzati nel tuo **Lady-Comp** è molto facile.



Segui i seguenti passi per ricevere

ACCESSO

al programma che genera in automatico un PDF, dei tuoi dati elaborati dal tuo Lady-Comp.

Vai sulla pagina: www.babycomp-it.org/prodotti/analisi_dati-ladycomp.html

Compila questo modulo qui per accedere al nostro sistema.

1.a Per la REGISTRAZIONE

altrimenti sei già registrato, fai il „Login“ con i tuoi indirizzo email e password.

Traduzione della pagina in italiano

Data Analysis
Login Page

Please complete the form below in order to log in to our system. After that, you will be able to generate a PDF file from the data created by your Lady-Comp device.

Please log in with your data.

E-mail

Password

Other Pages

If you want to login onto your account, click here: [Login](#)

You don't have an account yet? Click here: [Register](#)

In case you lost your password, you can get a new one via email: [Lost password](#)

Analisi Dei Dati

Pagina di accesso

Si prega di compilare il modulo sottostante per accedere al nostro sistema . Dopo di che , sarà possibile generare un file PDF dai dati elaborati dal tuo dispositivo Lady-Comp.

(Se sei qui per la prima volta, è necessario prima registrarsi)

Altre pagine (Other Pages)

Se desideri effettuare il login al tuo account , clicca qui : [Login](#)

Non hai ancora un account ? [Clicca qui](#) : **REGISTRATI** (freccia rossa)

Nel caso in cui tu abbia perso la password, è possibile ottenere una nuova via e-mail : [Password dimenticata](#)

1.b Compila il modulo e continua con la registrazione

Login Page

Please complete the form below in order to log in to our system. After that, you will be able to generate a PDF file from the data created by your Lady-Comp device.

Please register with your mail and a password. We will send a confirmation code to your email to verify the address.

E-mail

Password

Password

Other Pages

If you want to login onto your account, click here: [Login](#)

You don't have an account yet? Click here: [Register](#)

In case you lost your password, you can get a new one via email: [Lost password](#)

Pagina di accesso (Login Page)

Si prega di compilare il modulo sottostante (come sopra)

Inserisci la tua mail e scegli una Password (che devi inserire una seconda volta).

E-mail: (inserisci la tua email)
Password: (inserisci tua password)
Password: (ripeti la tua password)
(scegli una mail e una password che ricorderai per gli accessi futuri.)

Premere: Register (freccia rossa)

Ti invieremo un codice di conferma via e-mail per verificare che l'indirizzo sia corretto.

Altre pagine (Other Pages)

Se desideri effettuare il login al tuo ... (come sopra)

1.c Fase di Registrazione

Ti verrà inviato un codice di attivazione all' indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione.

Data Analysis

Login Page

Please complete the form below in order to log in to our system. After that, you will be able to generate a PDF file from the data created by your Lady-Comp device.

Please enter the activation code which has been sent to your e-mail.:

Activation code

Activate account

Information

Your account has been registered. Please check your mails in order to activate your account. In case you don't receive our email, please verify your spam folders.

Close

Other Pages

If you want to login onto your account, click here: [Login](#)

You don't have an account yet? Click here: [Register](#)

In case you lost your password, you can get a new one via email: [Lost password](#)

Informazioni (Information)

Il tuo **account è stato registrato**.

Prego **controlla la posta elettronica** perché tu possa **attivare il tuo account** .

Se non hai ricevuto la nostra e-mail, prego verifica le cartelle di spam.

Close (Chiudi SOLO questa finestrina pop up)

< vai nella tua posta e controlla le e-mail) >

2.a E-mail (ricevi una e-mail con un codice di accesso)

Il **contenuto** della **mail** è il **seguito**:

Hello (il tuo indirizzo mail) Your account for Lady-Comp has been created. Please verify your account by copying the following code when you try to access it:

XXXX-XXXX

If You have problems, do not hesitate to contact our support at our website. Kind regards Your Lady-Comp team

Ciao (Il Tuo Indirizzo email)

Il tuo account per Lady-Comp è stato creato.

Per verificare il tuo account, devi copiare il codice seguente: xxxx-xxxx

(Se hai problemi, non esitare a contattare l'Assistenza sul nostro sito.

Il tuo Lady-Comp Team

2.b Attivare (il tuo account)

Utilizza il codice di attivazione ricevuto nel passaggio precedente (2.a) e attiva il tuo conto

Login Page

Please complete the form below in order to log in to our system. After that, you will be able to generate a PDF file from the data created by your Lady-Comp device.

Please enter the activation code which has been sent to your e-mail.:

Activation code

2Fu0-0Cvy

Activate account

Other Pages

If you want to login onto your account, click here: [Login](#)

You don't have an account yet? Click here: [Register](#)

In case you lost your password, you can get a new one via email: [Lost password](#)

Pagina di accesso

Si prega di compilare il modulo sottostante

(INSERIRE il codice di attivazione che hai ricevuto per email)

Fare **ATTENZIONE** ai caratteri minuscoli e **MAIUSCOLI**, per questo consigliamo di fare una „copia“ del codice della mail e di „incollarlo“ in questo modulo. Così eviti di sbagliare.)

Altre pagine

Se desideri effettuare il login al tuo ... (come sopra)

3.a Dati personali

Completa il modulo con il tuo nome e cognome

Edit your profile here.

Please complete your profile in case you have not done this yet. If you don't want to change your password, you can leave the two password fields empty.

You are able to edit your e-mail address. As this address is your login to your account, you have to verify your account after changing the address. In that case we would send you an e-mail.

Please click into the boxes in order to change their data.

E-mail	<input type="text" value="james.demo@ladycomp.it"/>
First name	<input type="text" value="Demo"/>
Last name	<input type="text" value="User"/>
New password	<input type="password" value="*****"/>
New password	<input type="password" value="*****"/>

Completa il tuo profilo

inserendo il tuo
First name: Nome
e **Last name:** Cognome

Lasciare vuoti i due campi "New password".

Premere il tasto
Save Changes = Salva le modifiche

3.b Registrazione terminata

Edit your profile here.

Please complete your profile in case you have not done this yet. If you don't want to change your password, you can leave the two password fields empty.

You are able to edit your e-mail address. As this address is your login to your account, you have to verify your account after changing the address. In that case we would send you an e-mail.

Please click into the boxes in order to change their data.

Information

Your profile was successfully updated. You may now generate PDF files from the data of your Lady-Comp device.

Informazioni

Il tuo profilo è aggiornato con successo .
È ora possibile creare file PDF con i dati del dispositivo Lady-Comp .

Importante: ricorda la tua password e l'indirizzo email con il quale ti sei registrato.
Con questi dati potrai accedere, quando vorrai, alla **Analisi Dati**.



4. Analisi dei Dati

Get the visualisation of your Lady-Comp data here.

As soon as you have uploaded a file, you can download the generated output as PDF.

No file uploaded yet.

Upload a newer file to your account.

First, you need to get your the Lady-Comp file (usually *.txt) to your computer by connecting your device to it. Then, upload the file to your account by using the following form.

Click on the "Browse" button in order to upload the file. If you like, you may add a short comment.

File	<input type="button" value="Choose File"/> no file selected
Comment	<input type="text"/>

Qui ottieni la visualizzazione dei dati Lady-Comp.

Non appena è stato caricato un file, è possibile scaricare l'output generato in formato PDF.

Nessun file ancora caricato.

Carica il file più recente sul tuo account.
Per ottenere il file dal tuo Lady-Comp è necessario collegarlo con il cavetto USB al tuo PC o MAC (e si comporterà come una chiavetta USB. Troverai una cartella „VE“. All'interno di questa cartella c'è un file **.txt. Questo file lo puoi salvare sul tuo PC o MAC)

Successivamente puoi caricare in questo modulo il file „*.txt“ precedentemente salvato.

> scegli file
> Comment (puoi mettere un breve commento)
> Upload (carica il file)
adesso è necessario attendere che il file venga caricato

Information

Please wait until we have processed your data. This could take a few seconds. The output starts as soon as you click "continue".

Information

Your output file has been successfully generated. You may download the PDF file now by clicking the box above. Please note that we will not store this file permanently!

(si aprirà in automatico una finestra):

Informazioni

Attendere l'elaborazione dei dati . Questo potrebbe richiedere alcuni secondi .

Adesso puoi uscire premi su " continua " .


(si aprirà in automatico un'altra finestra):

Informazioni

Il file di output è stato generato con successo . È ora possibile **scaricare il file PDF** facendo **click** sulla casella soprastante.

Si prega di tener conto che noi non memorizziamo i file generati in modo permanente!

5. Clicca sul file generato per salvarlo sul tuo PC e aprirlo

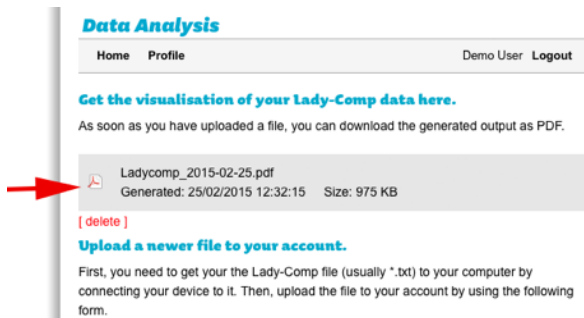

Qui ottieni la visualizzazione dei dati Lady-Comp.

Non appena è stato caricato un file, è possibile scaricarlo in formato PDF.

PDF (premi su PDF)

Carica il file più recente sul tuo account. (vedi il punto 4)